


Mode d'emploi

- 1** Soit j'appuie sur le bouton d'appel blanc qui se trouve au centre de la montre ou du pendentif.



- Soit j'appuie sur le bouton d'appel vert de la base.




En cas d'appui involontaire sur le bouton d'appel situé sur la base, le bracelet ou le pendentif, j'ai 10 secondes pour annuler l'appel en appuyant sur le bouton 

- 2** Un son intermittent est émis par le boîtier pendant 10 secondes.



La led  clignote rouge.

- 3** vous êtes en relation avec votre téléconseiller.

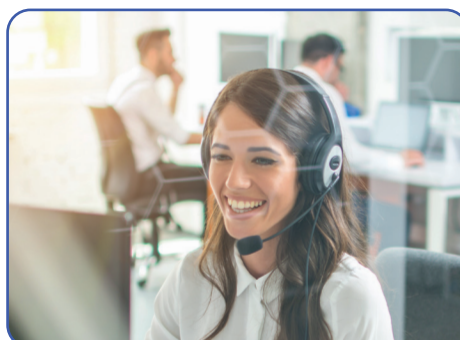

- A** Mon réseau d'aidant est prévenu et peut intervenir rapidement pour m'assister



- B** Si aucun intervenant ne répond, les secours sont alertés et viennent me porter assistance



Aide :

En cas de coupure de courant ou si je débranche l'appareil, que se passe-t-il ?

→ La led clignote vert



Je suis protégé pendant 36 heures
(surveillance de l'état de la batterie
à distance / ATE)

Mon bouton d'appel ne s'allume plus lorsque j'appuie ?

→ L'état de la pile est managé par ATE à distance et vous communiquera la procédure à suivre.

Puis je prendre un bain ou une douche avec le bouton d'appel ?

→ Les équipements que nous proposons sont robustes et étanches. Ils sont conçus pour une immersion totale de 30 minutes à 1 m de profondeur & peuvent vous accompagner dans toutes les situations de votre vie quotidienne (comme aller sous la douche avec votre pendentif ou votre bracelet).